




## MANUAL DE USO RÁPIDO DE CAMA DE CAMPOS MAGNÉTICOS PULSADOS



\*La colchoneta es de color negro

## LA INCREÍBLE MAGNETOTERAPIA.

Todos nosotros vivimos inmersos en un **campo magnético natural**, el terrestre, su ausencia origina descalcificación (como lo descubrió la NASA), en los astronautas, lo cual se corrige cuando ellos regresan a la Tierra. En la tierra, existen imanes naturales como la **MAGNETITA**, que conocemos como **IMÁN** y tiene la propiedad de atraer al hierro, a ésta propiedad se le llama **MAGNETISMO**.

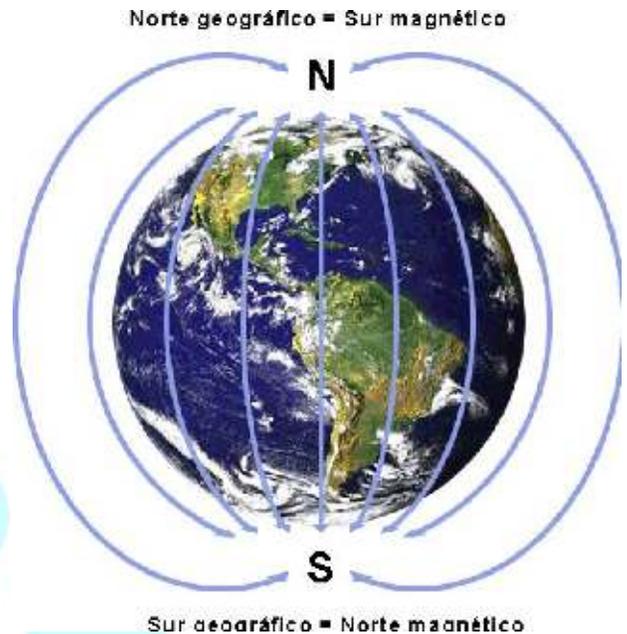


El campo magnético terrestre es 100,000 veces más fuerte que el del cuerpo y somos tan dependientes de este campo, que los astronautas al alejarse de ellos durante largos períodos en el espacio requieren campos magnéticos artificiales para mantener la salud. Los campos magnéticos penetran y atraviesan el cuerpo como si fuera aire, nada detiene su camino debido a que un campo magnético puede atravesar el cuerpo sin inconvenientes.



El cuerpo está compuesto de un 70% o más de agua, que no puede reducir o bloquear los campos magnéticos. Un fuerte imán colocado en un lado de la mano puede fácilmente

desviar la aguja de una brújula en el otro lado de la misma mano.


El hombre también puede generar campos magnéticos artificiales, por ejemplo frotando un pedazo de hierro con a un imán, o bien fabricando un ELECTROIMÁN haciendo pasar una corriente eléctrica por un alambre enrollado (llamado bobina), cada vez que pase corriente eléctrica a través de la bobina, se generará un campo magnético, y desaparecerá cuando la corriente se desconecta.

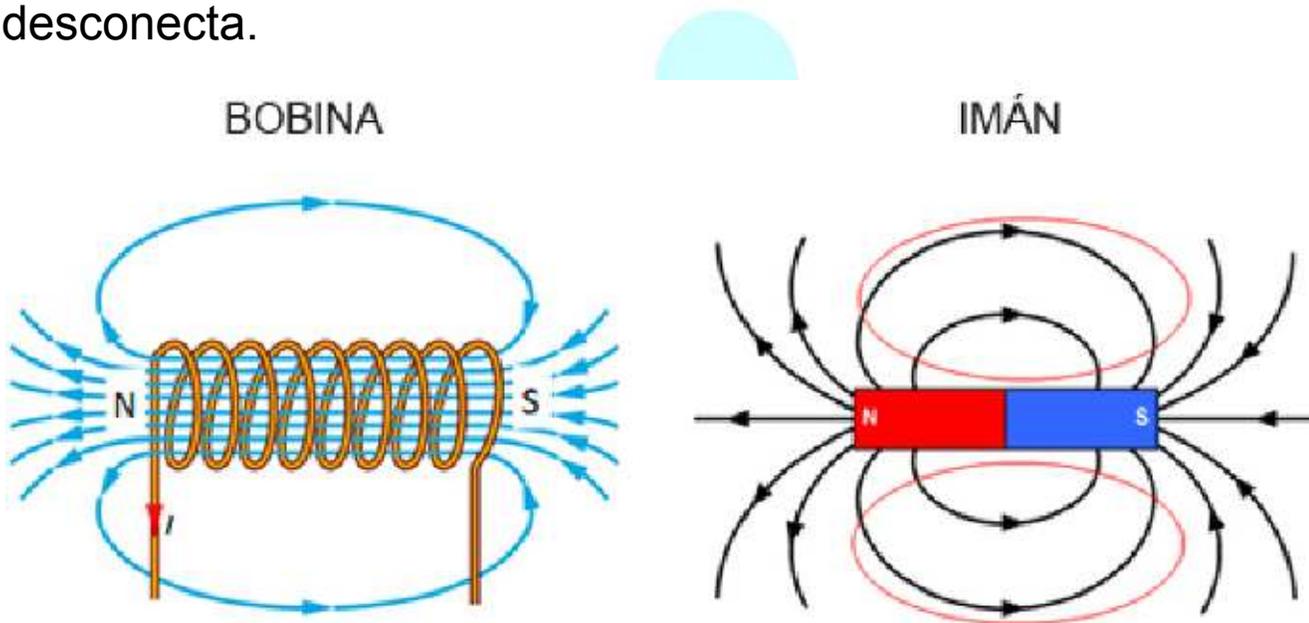

Varios tipos de imanes pueden producir estos efectos, los cuales incluyen imanes permanentes, tales como los de forma plana y las pastillas magnéticas o electroimanes de diversos tipos, tales como máquinas de resonancia magnética y pruebas de dispositivos para la conducción nerviosa.

## ¿Pero... qué es la magnetoterapia?

La magnetoterapia es una **técnica terapéutica consistente en aplicar Campos Magnéticos Pulsantes (CMP), artificiales**, sobre una zona del cuerpo o sobre todo el cuerpo, aquejado de una enfermedad o trauma. En esta técnica se controla la intensidad del campo (medida en GAUSS) y frecuencia de pulsación (medida en Hertz) y significa el número de pulsos por cada segundo, de ahí su nombre de Campos Magnéticos Pulsados. Aquí no se emplean los imanes; en ellos, la intensidad es la misma, pero en el CMP la intensidad puede variar según los síntomas.

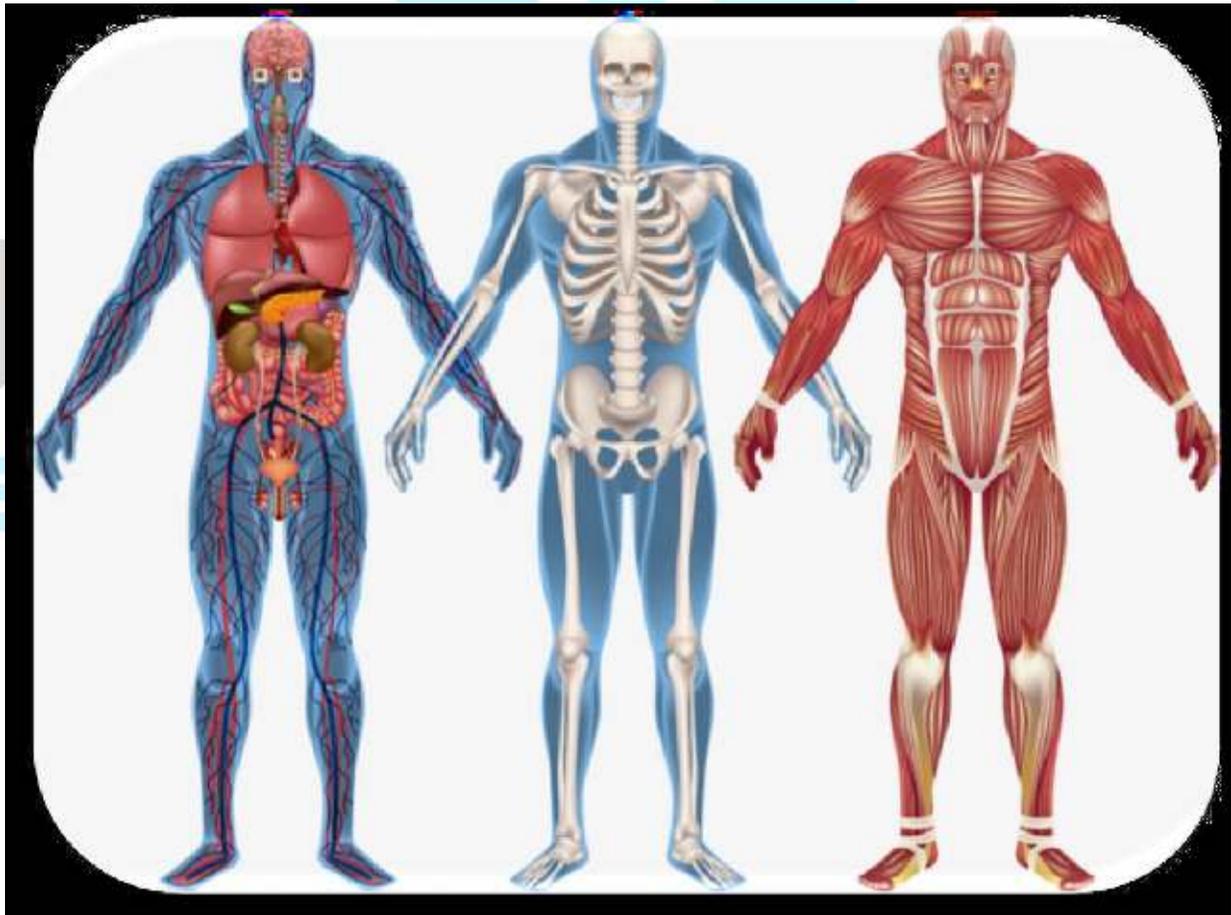

Esta terapia, está **avalada desde 1976 por la FDA** (Food & Drug Administration) para el tratamiento de **articulaciones, huesos, dolor crónico y cicatrización de úlceras.**

¿Quiénes se pueden beneficiar más con la TCMP? Todas las personas pues su acción es a nivel celular... **Desde deportistas de alto rendimiento y bailarines, hasta personas que pasan muchas horas frente a una pantalla,** los que tienen problemas de postura también se benefician grandemente. Sólo está contraindicado para aquellos que tienen marcapasos. Son un sinfín de padecimientos cuya condición puede mejorar con la TCMP.

El campo electromagnético es algo que el cuerpo necesita para funcionar y producir la conductividad eléctrica del cuerpo, la mayoría de las personas tiene conductividad baja y eso hace que el cuerpo no produzca la electricidad necesaria, por lo que el paciente **tiene que hacer más esfuerzo para generar la electricidad que necesita.**



**CICLO**


El ser humano es **ELECTROMAGNÉTICO** por naturaleza.

# BENEFICIOS DE LOS CAMPOS MAGNÉTICOS PULSADOS

- o Fácil de usar
- o Tecnología de vanguardia
- o Ayuda a equilibrar el PH celular
- o Investigaciones de universidades internacionales que sustentan la efectividad y seguridad de los CPM y la FDA los avala.
- o Estimula la regeneración de cartílagos y huesos.
- o Efecto analgésico y antiinflamatorio. Ayuda a controlar el dolor de cuello, espalda, rodillas, cadera, migraña, cólicos, etc.
- o Desinflama las varices, incrementa el flujo sanguíneo, ayuda a regenerar el endotelio de venas y arterias, dándole mayor fortaleza a las paredes de vasos sanguíneos.
- o Mejoran la cicatrización de las fracturas óseas.
- o Excelente ayuda para prevenir enfermedades respiratorias e infecciosas.
- o Es un estímulo bioregenerador (a nivel celular).
- o Evita la calcificación de los tejidos blandos. (Tumores y Cáncer).
- o Aumentan la producción de trifosfato de adenosina (ATP) y estimulan el ARN y ADN. “Básicamente ayudan al cuerpo en general, sanando la causa del dolor”.
- o Equilibrar el tráfico bioquímico simpático y parasimpático que desciende por la columna vertebral.
- o Acelera la cicatrización.
- o Mejora los procesos del cuerpo que combaten el estrés oxidativo celular.

Los CMP tienen una frecuencia extremadamente baja. Principalmente, están diseñados para simular procesos más naturales en el cuerpo. Esa es la principal diferencia, son sinérgicos con las funciones corporales, las amplifican. En cierto sentido, realmente no agregan una nueva energía al cuerpo, sino que estimulan la energía natural del cuerpo.

# INSTRUCCIONES DE USO

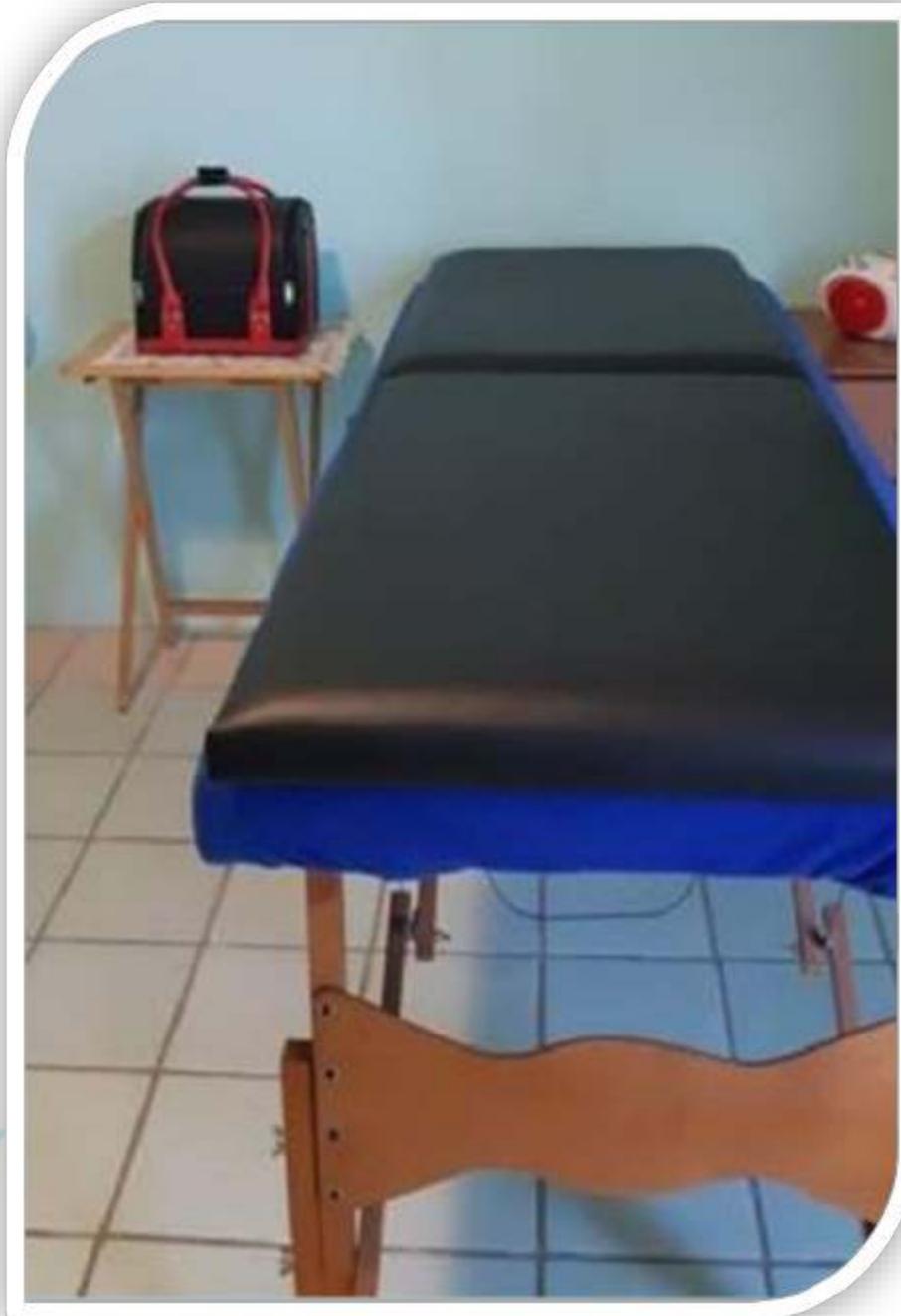

## IMPORTANTE


Colocar la cama en una superficie plana y el equipo en una mesa fija para el mismo.

# CONOCE TU EQUIPO

Conector a la corriente  
eléctrica

IMPORTANTE CONECTARLO  
A UN REGULADOR DE CORRIENTE

Botón de Encendido y  
Apagado

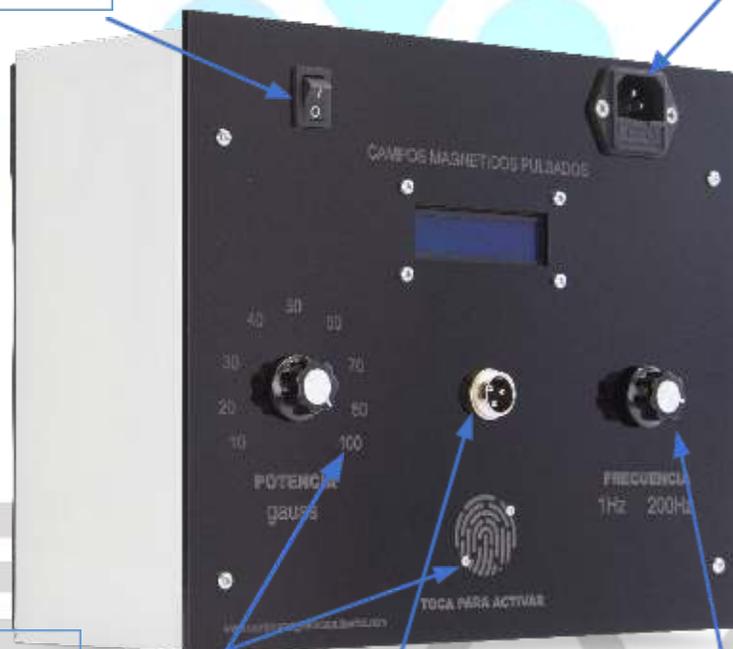

**SENSOR TOUCH**  
ACTIVA EL EQUIPO CON  
HUELLA

Conector

**Botón de Potencia**  
1 a 200 GAUSS

**Botón de Frecuencia**  
1 Hz a 200 Hz



## AVISO IMPORTANTE

**EL EQUIPO TIENE UN AÑO DE GARANTÍA, NO APLICA EN ACCESORIOS DAÑADOS O PERDIDOS (CABLES).**

NEWAVE

YA CONECTADO EL EQUIPO A LA CAMA

1. Se ajusta la potencia y frecuencia a usar en la terapia dependiendo la afección, para lo cual nos guiaremos con la tabla que incluimos en este manual de uso rápido.
2. Coloque su dedo sobre el área del sensor. En la pantalla se muestra el tiempo restante de la terapia.
3. SE LE DA AL PACIENTE UN VASO CON AGUA, UNA PIZCA DE BICARBONATO Y GOTAS DE LIMÓN, ANTES DE LA TERAPIA.

# TABLA DE FRECUENCIAS

POTENCIA 200 GAUSS EN TODOS LOS PADECIMIENTOS

TIEMPO DE TERAPIA PARA TODOS LOS PADECIMIENTOS 30 MINUTOS YA ESTABLECIDOS EN EL EQUIPO

PADECIMIENTOS	FRECUENCIA
ARTRITIS REUMATOIDE	50Hz
FRACTURAS	50Hz
OSTEOPOROSIS	60Hz
TUMORES, CÁNCER	200Hz
CARDIOPATÍAS	50HZ
ÚLCERAS CUTÁNEAS	50Hz
EDEMAS	50Hz
DEPRESIÓN	50Hz
INSOMNIO	60Hz
SINUSITIS	50Hz
ACNE	50Hz
ASMA	50HZ
HEMORROIDES	60Hz
CONJUNTIVITIS	50Hz
PROSTATITIS	60Hz
PROBLEMAS DE COLUMNA CERVICALES, DORSALES LUMBARES,SACRO Y COXIS CIÁTICA, LUMBALGIAS	60Hz
GONARTROSIS	50Hz
DESGASTE DE ARTICULACIONES RODILLAS, HOMBROS, MUÑECAS, CODOS, TOBILLOS	50Hz
INSUFICIENCIA RENAL	50HZ
QUISTES. MIOMAS	200Hz

Se recomienda integrar terapia EMTr para las afecciones neuronales



- o ALZHEIMER
- o EPILEPSIA
- o PARKINSON
- o DEFICIT DE ATENCION
- o PÉRDIDA DE MEMORIA
- o SISTEMA NERVIOSO ALTERADO

NEWAVE  
Sigue tu ciclo

## CONTRAINDICACIONES



- EVITA USAR EN MUJERES EMBARAZADAS O EN FASE DE ALIMENTACIÓN DEL BEBE.
- EVITA USARLO CON PERSONAS CON
- MARCAPASOS
- EVITA USARLO EN PERSONAS CON HEMORRAGIAS INTERNAS O EXTERNAS.
- EVITA USARLO EN MUJERES EN PERIODOS MENSTRUALES.

EL USO DE ESTE PRODUCTO ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO RECOMIENDA Y DE QUIEN LO USA

*SIGUE TU CICLO*